

ANIOXY'DM

Désinfectant de
Haut niveau des
Dispositifs médicaux



- Large spectre antimicrobien en 15 minutes (sporicide à 2 %)
- Péremption : 2 ans
- Formulé sans perborate
- Contrôle de la dilution par bandelette spécifique
- Compatibilité prouvée avec Sondes ETO
- pH à dilution (2%) : environ 9.5


INDICATIONS

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical, matériel d'endoscopie.
Compatible avec les sondes ETO.

CARACTERISTIQUES

- Poudre libératrice d'acide peracétique
- Poudre blanche à faible granulométrie
- Poudre hygroscopique (conserver à l'abri de l'humidité)
- Légèrement parfumée
- Le pH à dilution (2%) est d'environ 9.5
- Stabilité du bain de trempage : 4 heures


PRODUIT
À DILUER

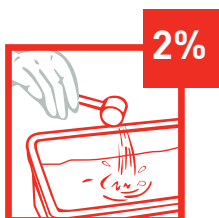

ANIOXY'DM

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux


MODE D'EMPLOI

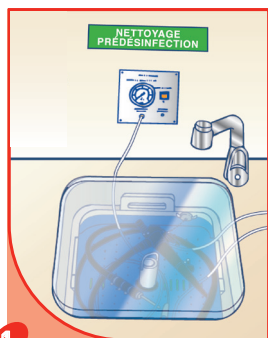


1 Etape de pré-désinfection :
Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, SEPTANIOS MD, SALVANIOS PH7 ou ANIOSYME PLA II.
Rincer soigneusement.
Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.




2 Dissoudre 100 g dans 5L d'eau tiède⁽¹⁾
Stabilité du bain : 4 h
⁽¹⁾ Contrôler la dilution à l'aide d'une bandelette spécifique, avant immersion de l'instrumentation.
Une cuillère doseuse = 25 g

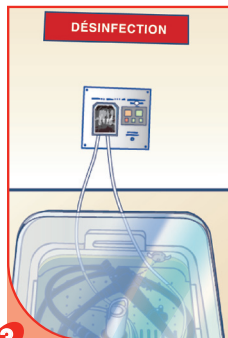

3 Immerger complètement le dispositif médical, préalablement nettoyé.
Irriguer les corps creux.
Temps de contact : 15 minutes

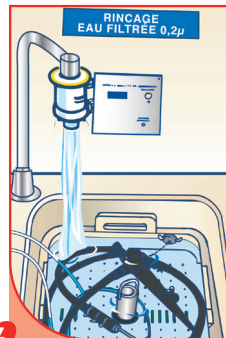

4 Rincer très soigneusement à l'eau stérile ou filtrée (0.2 µm).
Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur

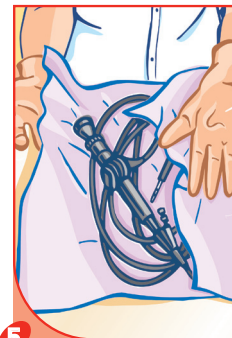

5 Essuyer avec un champ à usage unique.
Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

COMPOSITION

Poudre à base de percarbonate de sodium, tétraacétyl-éthylènediamine et chlorure de N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-diméthylammonium. Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage : de +5°C à + 30°C.
Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENT

2 seaux de 5 kg.....Réf. 2305.733

Bandelettes Réf. 100.107



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Les résultats décrits dans le tableau ci-dessous correspondent à des tests réalisés **en conditions de propreté : désinfection de haut niveau**

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 14561	15 min
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	15 min
Mycobactéries	EN 14348, EN 14563	15 min
Virus	EN 14476	15 min
	Selon EN 14476: Polyoma virus SV40	5 min
Spores de bactéries	EN 14347 EN 13704 - 5 log [B. subtilis, B. cereus, Cl. sporogenes]	15 min